


BEYOND VISION

NEWTOM
RX DC
Wireless

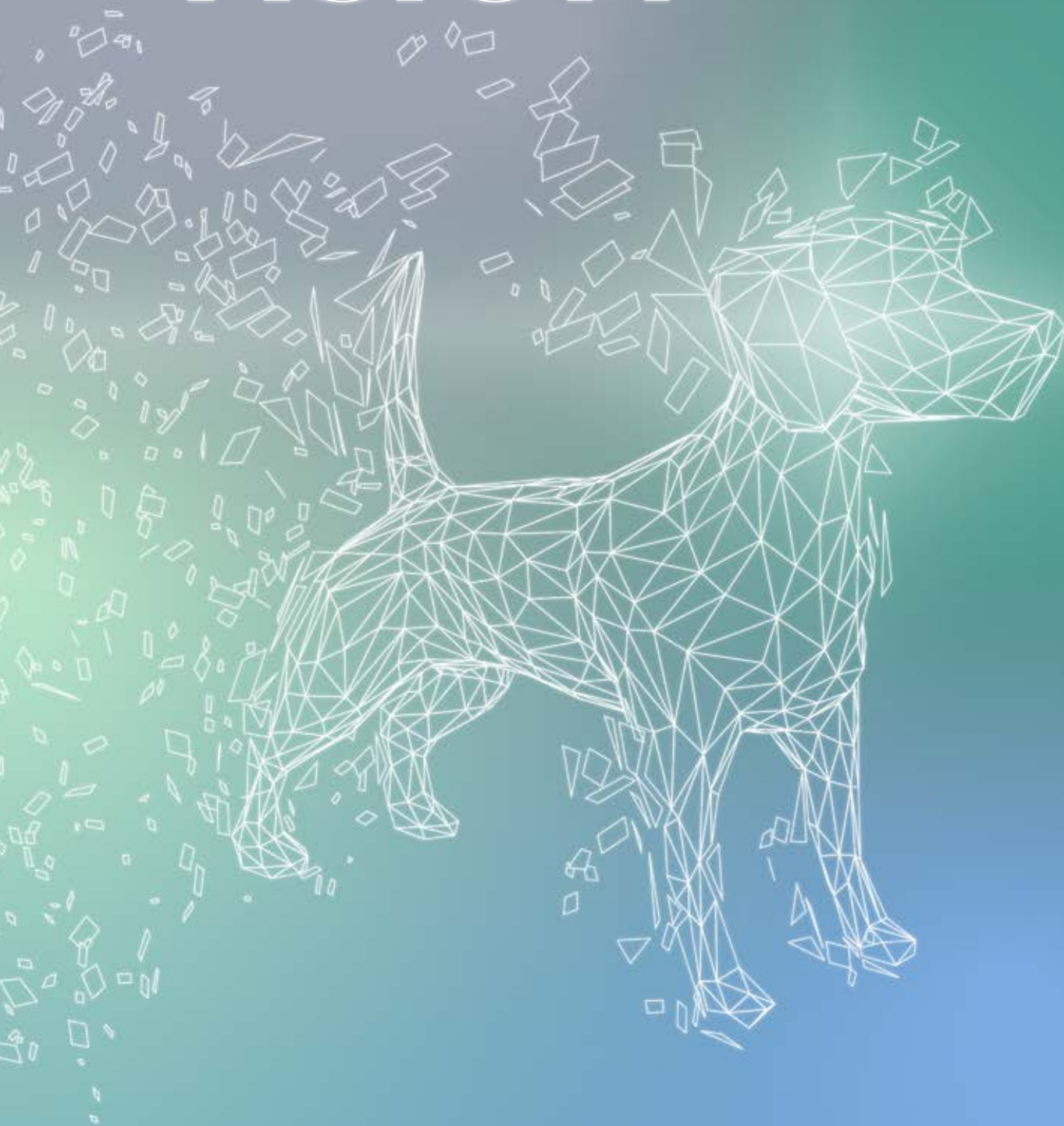


NEWTOM
CONE BEAM 3D IMAGING

LIBERTÀ DI POSIZIONAMENTO ED IMAGING INTRAORALE AD ALTA DEFINIZIONE

PRESTAZIONI SUPERIORI E MASSIMA ERGONOMIA

Il posizionamento di bracci e testata è stabile ed efficace, completamente adattabile al tuo lavoro grazie al goniometro con scala graduata. Composto da bracci con sistema di auto-bilanciamento integrato orientabili in 6 direzioni - disponibili nelle lunghezze: 40, 60 e 90 cm, per il massimo della semplicità di installazione.

Aumento del parallelismo dei raggi X e collimatore incorporato consentono a RX DC VET di raggiungere una distanza fuoco-pelle di 30 cm. RX DC VET ti permette di avere immagini nitide, precise e grande livello di dettaglio.

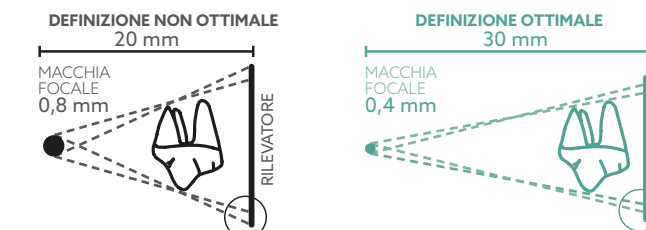

INSTALLAZIONE RAPIDA E COMANDO SENZA FILI

L'efficienza della tecnologia senza fili con la massima semplicità di utilizzo.

Il controller wireless libera dai limiti imposti dai pannelli di controllo a bordo macchina e dai comandi a parete.

È dotato di un pulsante per lo sparo ultra-rapido (frazione di secondo) e di due semplici impostazioni con le quali è facile selezionare il programma più adatto per la migliore acquisizione radiografica.

SEMPLICE INSTALLAZIONE, VERSATILITÀ, AFFIDABILITÀ






NEWTOM

CONE BEAM 3D IMAGING

Generatore	A potenziale costante, comandato da microprocessore
Frequenza di esercizio	145 ÷ 230 KHz con autoregolazione (175 KHz tipici)
Fuoco	0,4 mm (IEC 336)
Filtrazione totale	2 mm @ 60 kV / 2 mm @ 65 kV / 2 mm @ 70 kV (*)
Corrente anodica	4 / 8 mA
Tensione al tubo radiogeno	60 / 65 / 70 kV (*)
Tempi di esposizione	0,020 – 1.000 secondi, scala R'10 e R'20
Distanza fuoco-pelle	20 e 30 cm
Campo di irradiazione	Ø 60 mm e Ø 55 mm (con cono tondo)
Collimatori aggiuntivi (opzionale)	35 x 45 mm (con cono rettangolare per sensori taglia 2) 31 x 41 mm e 22 x 35 mm, per sensori taglia 1 e taglia 0
Alimentazione	50/60 Hz, 115-120Vac ±10% o 230-240Vac ±10%
Ciclo di servizio	Funzionamento continuo con autoregolazione fino a 1s/90s totali
Bracci (solo per versione Standard)	Disponibili in 3 lunghezze: 40 cm – 60 cm – 90 cm
Estensione massima braccio	230 cm, dalla parete
Versioni	Standard (a parete) o Mobile (su carrello portatile)

(*) valori dipendenti dal paese dove il prodotto è commercializzato

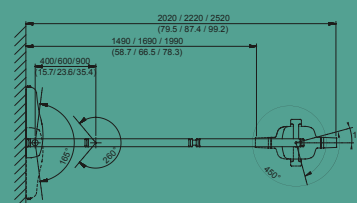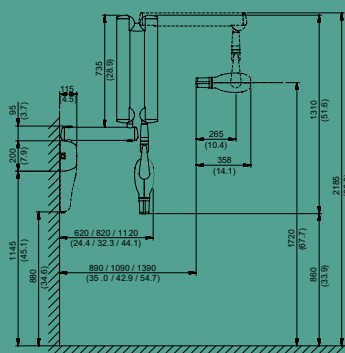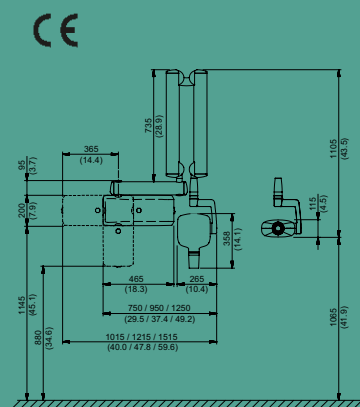

NRXWVET1251500

10/2025



Making Your Life Better.

BU MEDICAL EQUIPMENT

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA HEADQUARTERS

Cefla s.c. - Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola - BO (Italy)
tel. +39 0542 653111
fax +39 0542 653344

STABILIMENTO PLANT

Via Bicocca, 14/c
40026 Imola - BO (Italy)
tel. +39 0542 653441
fax +39 0542 653601

CEFLA NORTH AMERICA

6125 Harris Technology Blvd.
Charlotte, NC 28269 - U.S.A.
Toll Free: (+1) 800.416.3078
fax: (+1) 704.631.4609

Le immagini e le caratteristiche tecniche riportate nel presente catalogo sono puramente indicative. Nell'ambito di un costante aggiornamento tecnologico le caratteristiche tecniche possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso. In applicazione alle normative vigenti, nelle aree Extra UE alcuni prodotti, nonché alcune caratteristiche tecniche, potrebbero avere disponibilità e configurazioni diverse. Vi invitiamo a contattare sempre il distributore di zona per caratteristiche tecniche aggiornate, disponibilità e configurazioni.