

BEYOND VISION




NEWTOM
CONE BEAM 3D IMAGING

CAPTEUR INTRA-ORAL X-VS E

Des images plus nettes avec la même dose et davantage de confort pour le patient.

NEWTOM X-VS E

- NEWTOM continue à se perfectionner et lance le nouveau capteur intra-oral X-VS E. La double mesure garantit toujours le meilleur résultat du diagnostic, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Plus fin par rapport aux capteurs précédents.
- Avec la même dose mais avec une sensibilité accrue, il permet d'obtenir des images avec des détails plus définis et d'identifier aussi les microfractures coronaires.
- Plus confortable pour le patient et plus résistant aux liquides, le capteur X-VS E offre au praticien une aide au diagnostic de haute qualité.

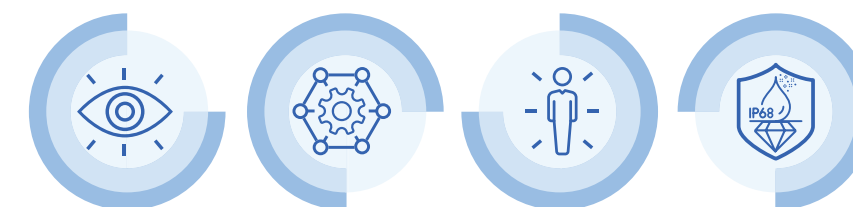

PLUS SENSIBLE

Des images plus nettes et définies pour un diagnostic sans erreur et une dose de rayons limitée.

PLUS PRATIQUE

Un câble plus long pour davantage de souplesse durant le travail quotidien de la clinique.

PLUS FIN

L'épaisseur de 4,5 mm seulement est tout bénéfice pour le patient et facilite le travail.

PLUS IMPERMÉABLE

IP 68 pour une excellente résistance à la pénétration de liquides et de poussières, quel que soit le contexte d'utilisation.

BEYOND VISION

ZONE ACTIVE VASTE

Les deux tailles présentent une zone active vaste qui exploite presque totalement la partie frontale du capteur afin d'obtenir des images cliniques complètes des différentes anatomies étudiées.



HAUTE DÉFINITION SANS MODIFIER LA DOSE

X-VS E, avec la même dose, offre un niveau de contraste et une netteté supérieurs, ce qui permet de disposer de plus de détails pour aider à l'identification des pathologies dentaires courantes.

SENSOR E-Technology **HD**



SENSOR Standard



SENSOR E-Technology **ECO**




SENSOR Standard



EXCELLENTE QUALITÉ MÊME AVEC DES DOSES INFÉRIEURES

Même en réduisant la dose, l'image reste facile à interpréter dans les moindres détails.

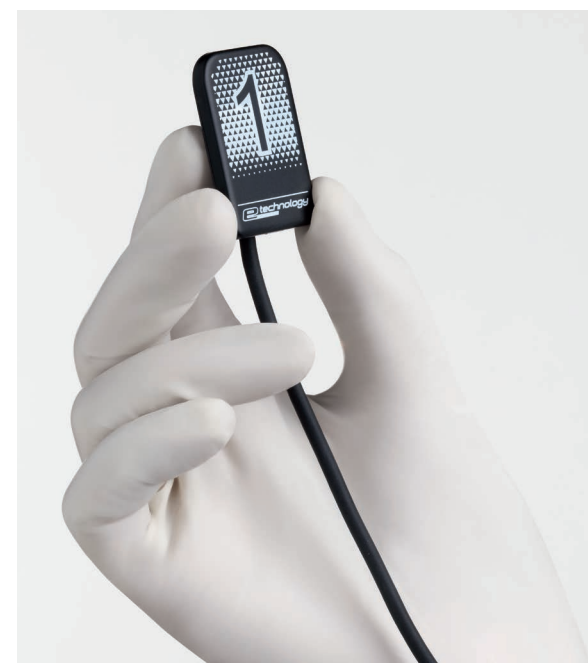

CONFORT

Grâce à son épaisseur de 4,5 mm seulement, X-VS E est extrêmement fin et confortable. Ses angles arrondis et ses bords lisses confèrent également davantage de confort car il est moins encombrant dans la bouche du patient et facile à positionner.

EFFICACITÉ DE FONCTIONNEMENT

Le câble de 3 mètres permet d'atteindre facilement le patient, y compris dans les grands espaces, et de garantir une connectivité USB rapide et directe sur l'ordinateur de bureau ou portable du cabinet, sans devoir ajouter de boîtiers de commande supplémentaires. Le câble est également équipé d'un stabilisateur qui réduit la consommation d'énergie : il ne sera pas nécessaire de mettre en pause pour éviter la surchauffe et le confort du patient sera toujours assuré.

POSITIONNEURS

X-VS E est fourni avec des positionneurs spécifiques pour la réalisation correcte des différents types d'examen demandés.

HAUTES PERFORMANCES À FAIBLE DOSE

Toute la qualité de l'imagerie NEWTOM pour des diagnostics rapides et sans erreur.

La sensibilité accrue de X-VS E garantit, avec la même dose, des images avec un niveau de contraste et de détail plus élevé par rapport aux autres capteurs filaires de la gamme.

X-VS E est non seulement un gage de sécurité pour le patient mais sa faible épaisseur permet davantage de confort au moment du positionnement pour les différents types d'examen.

Le logiciel NNT traite les images et, grâce à ses filtres spécifiques également, il permet de souligner les régions et les détails d'intérêt clinique.



FILTRES NEWTOM ApT

En mode NEWTOM Adaptive Multivision, X-VS E permet d'obtenir jusqu'à 5 images différentes optimisées par les filtres NEWTOM ApT (Adaptive Picture Treatment). Il sera ainsi possible d'observer des détails différents selon les besoins cliniques.

PRIME



Image Prime : parfaite pour les experts qui ont besoin d'une appréciation clinique pure. Le filtre Raw n'applique aucune altération due au traitement.

SOFT



Image Soft : elle permet de visualiser parfaitement les tissus mous de l'apex jusqu'à la base grâce au filtre Soft Tissues Preserving qui maintient inaltérées les zones présentant un risque de noircissement.

REGULAR

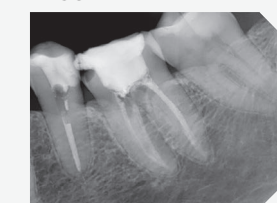


Image Regular : équilibrée, parfaite pour la plupart des applications, grâce au filtre Default qui équilibre le bruit, le contraste et la netteté.

STRONG




Image Strong: optimisée au niveau du contraste grâce au filtre High Details, qui souligne les détails, comme les os trabéculaires et les caries.

CAPTEUR X-VS E	TAILLE 1	TAILLE 2
Dimensions extérieures (mm)	38,5 x 25	45 x 31,6
Épaisseur (mm)	4,5	4,5
Matrice de Pixel	1500 x 1000	1800 x 1300
Dimension Pixel (µm)	20	20
Résolution maxi (lp/mm)	25	25
Profondeur des niveaux de gris	Acquisition à 16 bits - max. 65 535 niveaux de gris	
Technologie capteur	APS CMOS	
Technologie du scintillateur	CsI (Iodure de Césium) à dépôt direct	
Indice de protection de l'enveloppe	IP 68 (étanchéité garantie contre les liquides et la poussière)	
Compatibilité avec les générateurs radiographiques	N'importe quel générateur AC ou DC avec facteurs techniques compris entre 60 - 70 kV et 1 - 8 mA et contrôle de précision des temps d'exposition	
Connectivité	USB Direct sur PC	



LOGICIEL X-VS E	
Logiciel d'acquisition (pour PC)	iCapture avec filtres image X-VS E dédiés pour des logiciels tiers et pour archivage automatique des paramètres d'exposition RX DC sur PC
Logiciel de gestion des images (pour PC)	NNT (conforme au schéma ISDP®10003:2020 selon la norme EN ISO/IEC17065:2012 - certificat numéro 2019003109-3) et application pour iPad NNT viewer (gratuits)
Protocoles pris en charge sur NNT	DICOM 3.0, TWAIN, VDDS
Connectivité Nœuds DICOM	Conforme IHE (Print ; Storage Commitment, SR document ; WorkList ; MPPS ; Query/Retrieve)
Registre radiologique	Fonction dans NNT pour associer les paramètres d'exposition aux images radiographiques de chaque examen (exportable au format PDF ou CSV)

CONFIGURATION MINIMALE DE SYSTÈME REQUISE X-VS E	
Systèmes d'exploitation supportés	Microsoft® Windows® 10, 11 Professional 64 bits
Processeur	Intel Core i3 ou supérieur
RAM	4 Go (8 Go recommandés)
Carte graphique	Carte vidéo 3D discrète ou GPU intégré
Paramètres d'affichage	1280 x 1024 ; 1344 x 768 ou supérieur, 16 millions de couleurs
Port	USB 2.0 ou supérieur
Alimentation	Utiliser un alimentateur de puissance adéquate à celle requise par la carte vidéo utilisée

X-VS E -1

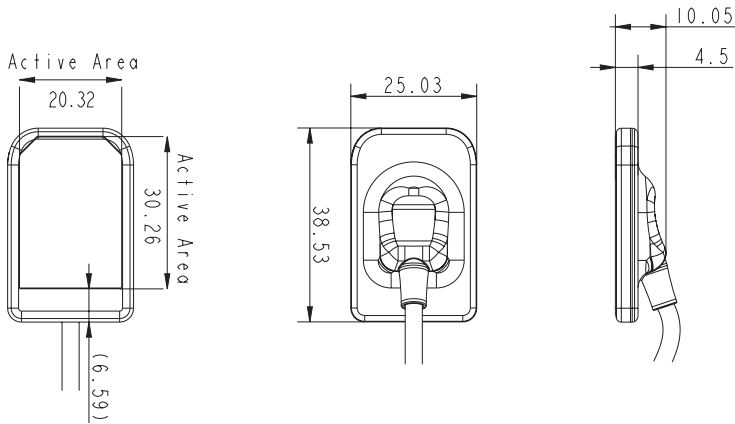

X-VS E - 2

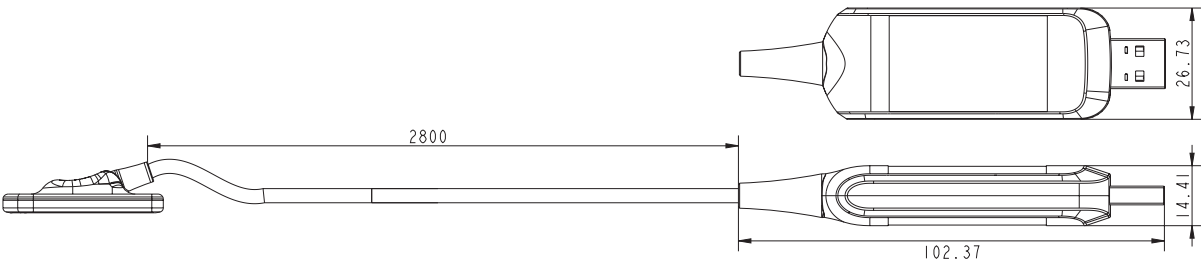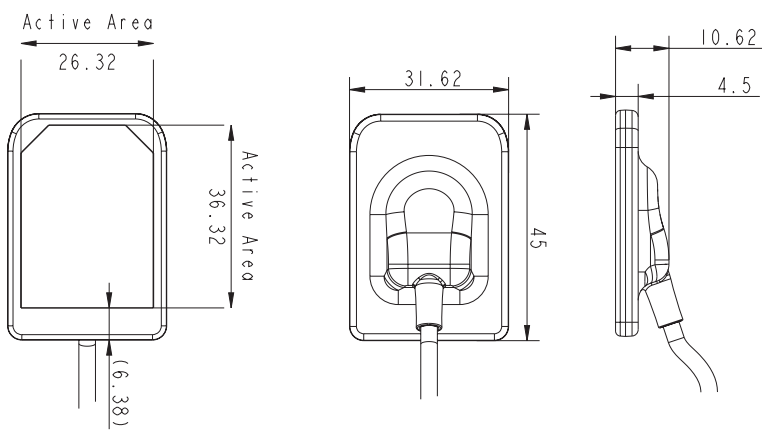

Dimensions en centimètres
(dimensions en pouces)

Les images et caractéristiques techniques présentées dans ce catalogue sont purement indicatives.
Dans le cadre d'une mise à jour technologique constante, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Conformément à la réglementation en vigueur, dans les zones hors UE, certains produits ainsi que certaines caractéristiques techniques peuvent avoir des disponibilités et configurations différentes.
Nous vous invitons à contacter systématiquement le distributeur local pour obtenir des caractéristiques techniques, disponibilités et configurations à jour.

NEWTOM

CONE BEAM 3D IMAGING



Making Your Life Better.

BU MEDICAL EQUIPMENT

SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA HEADQUARTERS

Cefla s.c. - Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola - BO (Italy)
tel. +39 0542 653111
fax +39 0542 653344

STABILIMENTO PLANT

Via Bicocca, 14/c
40026 Imola - BO (Italy)
tel. +39 0542 653441
fax +39 0542 653601

CEFLA NORTH AMERICA

6125 Harris Technology Blvd.
Charlotte, NC 28269 - U.S.A.
Toll Free: (+1) 800.416.3078
fax: (+1) 704.631.4609